

Точнее фиксировать, динамичнее выполнять ОТТИСКИ.



Monopren® transfer

А-силикон, для фиксирующих и функциональных оттисков особенно.

Идет ли речь о комбинированном протезе или имплантологических работах, общее правило: важен слепок. Monopren transfer, А-Silikon для точных оттисков без каких-либо компромиссов, одноэтапный оттисковый материал с начальными гидрофильными свойствами, обеспечивает особые преимущества при выполнении фиксирующих оттисков в комбинированном протезировании и имплантологии: Схватывание в лучшее время, высокая конечная твердость и оптимальная эластичность. Текучесть, оптимальная для функциональных оттисков, и сильно выраженные тиксотропные свойства обеспечивают желаемое давление и одновременно точное попадание на первичные детали или слепочные головки. Monopren transfer предлагается фирмой Kettenbach в виде системы мягких пластиковых пакетов, а также в виде картриджей или тубиков.

Начальная гидрофилия



Monopren® transfer – все преимущества для Вас :

- Начальные гидрофильные свойства способствуют немедленному протеканию материала на первичные коронки, оттисковые головки или границы препарирования в частности и во влажной среде.
- Высокая твердость Shore-A обеспечивает хорошую фиксацию первичных коронок и более высокую точность припасовки.
- Высокая эластичность позволяет легко вынимать оттиск из ротовой полости и не создает опасность поломки при изготовлении модели.
- Краткое время пребывания во рту при удобном для доктора общем рабочем времени особенно удачно для пользователя, приводит к уменьшению искажений на этапе твердения и не создает ненужных нагрузок для пациента.
- Сильная тиксотропность для обеспечения давления.

Рабочее время и время схватывания:

В картридже и в мягких пакетах:

Общее рабочее время: 2 минуты

Пребывание во рту: 2 минуты

Окончательное схватывание: 4 минуты

В тубике:

Общее рабочее время: 2 минуты 45 секунд

Пребывание во рту: 2 минуты 15 секунд

Окончательное схватывание: 5 минут

Сравнительное исследование фирмы Kettenbach, замеры контактного угла с помощью измерительного прибора DSA 100, фирмы Krüss, 2007 оценка: методика Circle fit

■ Monopren® transfer


■ Impregum™ Penta™

■ Affinis™ MonoBody

■ Aquasil™ Ultra Monophase Deca 380

■ Honigum® MixStar Mono

Сравнение контактного угла спустя 30 секунд после начала смешивания в течение первых 3 секунд после нанесения капли воды при относительной влажности воздуха 80 %

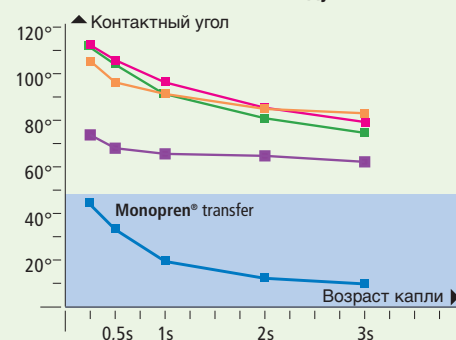

Monopren® transfer в сравнении с конкурентами достигает наименьшего начального контактного угла сразу же и на длительное время.

Monopren® transfer – среднетекучий одноэтапный оттискный материал на основе винилполисилоксана

Monopren® transfer в картридже

Monopren® transfer **стандартная упаковка**,

2 x 50 мл + 6 смесительных канюль, артикул №: 11846



Monopren® transfer в мягких пакетах

Monopren® transfer **базовый набор**,

1 x 362 мл, артикул №: 28096

10 динамических смесителей, 1 корпус картриджа

Monopren® transfer **стандартная упаковка**,

2 x 362 мл, артикул №: 11881



Monopren® transfer поставляется также и в тубиках.

Принадлежности

Panasil адгезивный лак 10 мл, артикул № 14101

Динамические смесители, 50 штук, артикул № 17253

Корпус картриджа, 1 шт., артикул № 17744

PLUG & PRESS®
Чисто. Надежно. Быстро

Kettenbach GmbH & Co. KG, P.O.B 1161, 35709 Eschenburg/Germany, Tel.: +49 2774/705-99,
Fax: +49 2774/705-33, www.kettenbach.com, E-Mail: info@kettenbach.com