

Преимущества в пяти случаях – семейство Futar®.


- Предельно высокая конечная твердость для оптимальной работы
- Низкая эластичность – отсутствие эффекта пружины при совмещении моделей
- Отличные характеристики схватывания обеспечивают комфорт для пациента, Лишний материал можно отломить уже во рту
- Материал удобно обрезать скальпелем, он очень хорошо фрезеруется
- Высокая тиксотропность предотвращает стекание материала в межзубные участки и обеспечивает легкое изъятие из ротовой полости

Futar® теперь в экономичном запасном пакете!
 Сэкономьте теперь с помощью нового запасного пакета с D Futar®, Futar® D и Futar® D Fast: 10 картриджей и 50 смесительных канюлей по специальной цене



Свойства материала

Продукт	Твердость Shore	Общее рабочее время	Время пребывания во рту	Время схватывания
Futar®	Shore A 90	30 сек.	1 мин. 30 сек.	2 мин.
Futar® D	Shore D 43	30 сек.	1 мин. 30 сек.	2 мин.
Futar® D Fast	Shore D 43	15 сек.	45 сек.	1 мин.
Futar® retarD	Shore D 43	1 мин. 30 сек.	3 мин.	4 мин. 30 сек.
Futar® Scan	Shore D 35	15 сек.	45 сек.	1 мин.

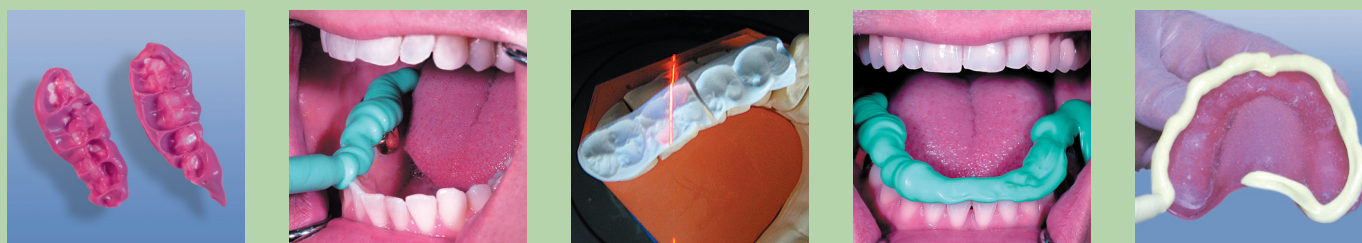

Futar®

Futar® стандартная упаковка
2 x 50 мл + 12 смесительных канюль

артикул № 11912



Futar® D

Futar® D стандартная упаковка
2 x 50 мл + 12 смесительных канюль

артикул № 11932



Futar® D Fast

Futar® D Fast стандартная упаковка
2 x 50 мл + 12 смесительных канюль

артикул № 11961



Futar® retarD

Futar® retarD стандартная упаковка
2 x 50 мл + 12 смесительных канюль

артикул № 11951



Futar® Scan **НОВИНКА**

Futar® Scan стандартная упаковка
2 x 50 мл + 12 смесительных канюль

артикул № 11971



Да, я хотел бы сейчас познакомиться с Futar® !

- Прошу Вас прислать мне более подробную информацию по Вашей продукции.
- Прошу Вас организовать встречу с Вашим представителем.
- Прошу Вас прислать предложение по Futar®, позвоните мне, пожалуйста

Я приобретаю через следующее дентал-депо:

Имя _____

Улица _____

Почтовый индекс, город, страна _____

Штамп клиники / лаборатории


Телефон/факс _____

Дата _____ Подпись _____

Kettenbach GmbH & Co. KG, P.O.B 1161, 35709 Eschenburg/Germany,
 Tel.: +49 2774/705-99, Fax: +49 2774/705-33, www.kettenbach.com,
 E-Mail: info@kettenbach.com

Очарование совершенства.

Линия Futar® – точная регистрация прикуса на высшем уровне!

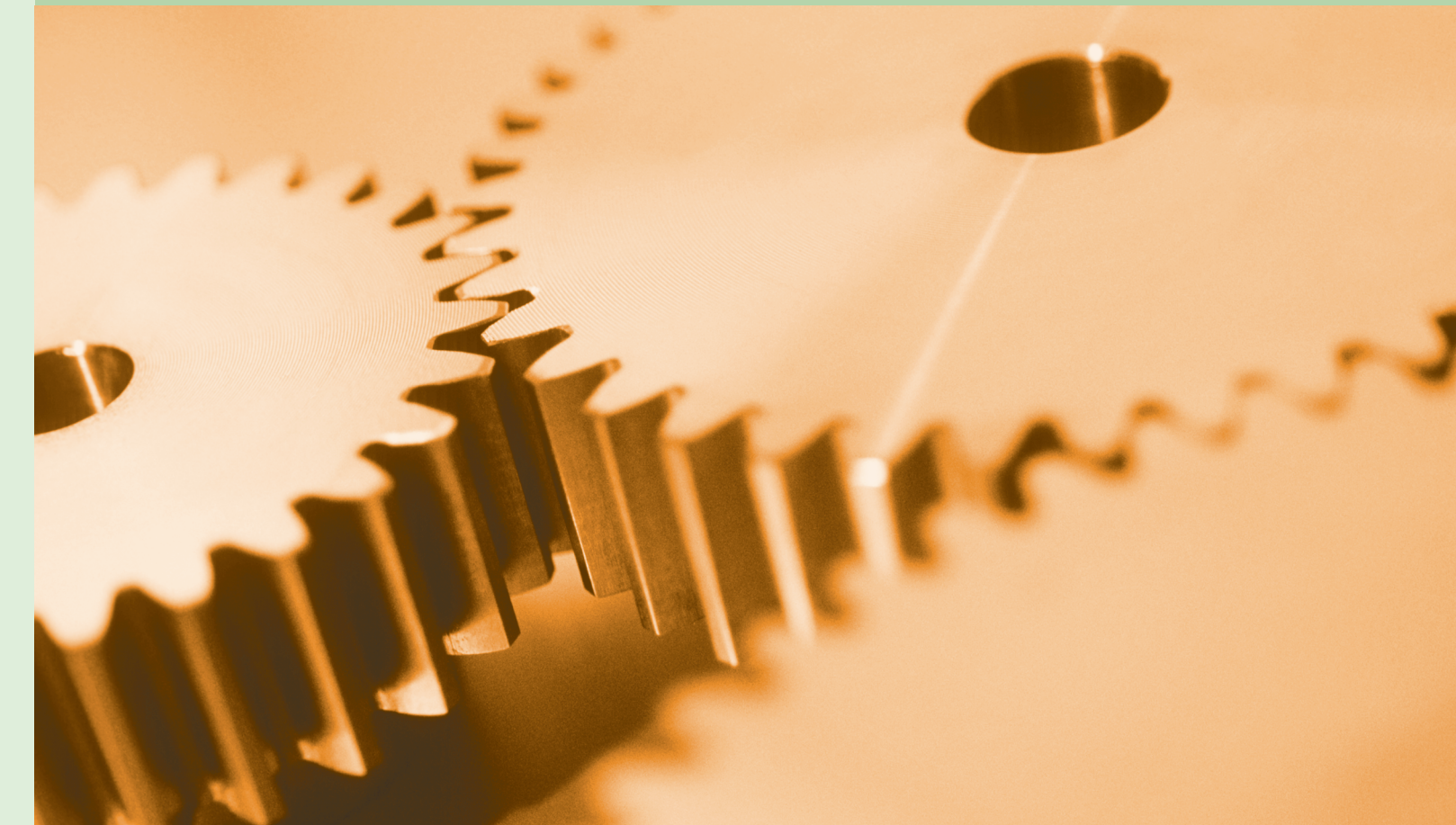

Первый во всех пяти случаях:

- ☒ Futar®
- ☒ Futar® D
- ☒ Futar® D Fast
- ☒ Futar® retarD
- ☒ Futar® Scan



В пяти случаях максимум точности и комфорта.

Выбирая материал для регистрации прикуса, Вы прежде всего особое значение придаете высокой конечной твердости с удобным рабочим временем? Или же Вам совсем не нужна скорость работы? Возможно Вы предпочитаете даже несколько более низкую конечную твердость или же Ваш материал должен быть „сканируемым“?

Какие бы требования Вы не предъявляли, имея в распоряжении Futar®, Futar® D, Futar® D Fast, Futar® retarD и Futar® Scan, у Вас всегда будет возможность выбора материалов для регистрации прикуса, являющихся лидерами на рынке вот уже свыше 10 лет. И не только на рынке Германии!
Выберите подходящую для Вас конечную твердость и рабочее время и убедитесь в максимуме точности и комфорта.

Futar®. Первый. Свыше 10 лет.

Futar®, Futar® D и Futar® D Fast – свыше 10 лет эти материалы являются номером 1 в группе материалов для регистрации прикуса в Германии¹⁾. Выдающееся достижение, красноречиво подчеркивающее превосходное качество Futar®, Futar® D и Futar® D Fast. Четкая

X лет лидер на рынке
концентрация на полезных для пользователя эффектах, всегда высокое качество продукта на протяжении многих лет, постоянное усовершенствование и интеграция инноваций: Именно так становятся первыми. И так ими остаются.

1) Источник: GfK

Futar® – по результатам теста первый и в США.

В сравнительном тесте, проведенном американским специальным органом REALITY, где исследовали 19 материалов для регистрации прикуса, материал Futar® набрал 4,2 из 5 возможных пунктов и был объявлен победителем. REALITY обеспечивает стоматологов и зубных техников независимой информацией и проводит тесты в области стоматологии. REALITY осуществляет контроль за товарами и объективное тестирование стоматологической продукции. Исследовались такие важные для пользователя свойства продуктов как устойчивость на излом, смачиваемость, простота работы с материалом, консистенция, соответствующее рабочее время и т.п..

(s. ©2005 REALITY Publishing Co. Vol. 19)

Пять продуктов Futar® – от классического до сканируемого.



Futar® – комфортабельный классический материал.



- Сохраняйте контроль в течение всего рабочего времени.
- Твердый А-силикон: твердость Shore-A- 90
- Удобное рабочее время - 30 секунд
- Точные результаты и максимальный комфорт
- Удобно обрабатывать, фрезеровать или обрезать
- Лишние детали можно удобно отломать

Futar® D – удобный твердый материал.




- Futar® D – предельно твердый А-силикон, в котором сочетается оптимальная твердость и удобное рабочее время.
- Предельно твердый А-силикон: твердость Shore-D 43
- Удобное рабочее время - 30 секунд
- Оптимально отвердевает и очень хорошо фрезеруется
- Великолепные текучие свойства с точными результатами
- Низкая эластичность снижает эффект пружины при размещении моделей

Futar® D Fast – не просто быстро, а в два раза быстрее.




- Futar® D Fast, самый быстрый член семейства Futar®, затвердевает за рекордное время.
- Предельно твердый А-силикон: Твердость Shore-D 43
- Предельно быстрые характеристики схватывания: рабочее время 15 секунд, время схватывания 45 секунд
- Особенно легкое удаление сводит к минимуму риск деформаций
- Прекрасные текучие свойства при высокой тиксотропности

Futar® retarD – столько времени, сколько нужно.

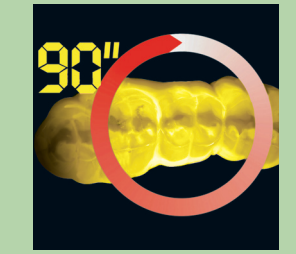

- Необычная комбинация твердости и характеристик схватывания для множества показаний к использованию.
- Предельно твердый А-силикон: Твердость Shore-D 43
- Особенно удобное рабочее время - 90 секунд
- Оптимальный материал, например, для миоцентрической регистрации прикуса, фиксации оттисковых головок или индивидуального формирования края. Особенно удобное рабочее время 90 секунд
- Разнообразное использование и в лаборатории: в качестве изолирующего материала или для изготовления сегментов моделей.

Futar® Scan – современный материал для оптической фиксации данных.

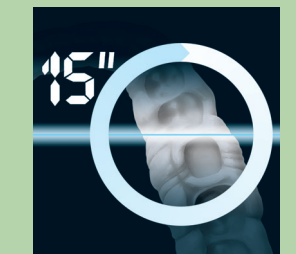

- Futar® Scan обеспечивает оптимальные результаты при регистрации с помощью оптики или лазера в системах CAD/CAM.
- Лучшие результаты сканирования в системах с оптикой и лазером (естественно без обработки пудрой)
- Предельно твердый А-силикон (твердость Shore-D 35) с отличной устойчивостью на изгиб
- Предельно быстрые характеристики схватывания: рабочее время 15 секунд, время схватывания 45 секунд
- Отлично обрезается скальпелем
- Низкий расход материала благодаря подаче через смесительные канюли

Пять продуктов Futar® для различных показаний.

	Futar®	Futar® D	Futar® D Fast	Futar®retarD	Futar® Scan
Материал для регистрации прикуса в шприцах, используется также для изготовления шаблона	🦷	🦷	🦷	🦷	🦷
Материал в шприцах для регистрации прикуса, требующего особенно много времени				🦷	
Для покрытия прикусных вилок при регистрации	🦷	🦷	🦷		🦷
Материал для изготовления шаблонов, например, для внутриротовых шаблонов с опорным штифтом	🦷	🦷	🦷	🦷	🦷
Для изготовления сегментов моделей при установке керамических, литых или пластмассовых пломб для пришлифовки окклюзии на модели		🦷	🦷	🦷	🦷
Материал в шприцах для слепков в имплантологии		🦷		🦷	
Миоцентрическая регистрация прикуса				🦷	
Для формирования индивидуального края				🦷	
Изолирующий материал для запакровки пластмассовых и фарфоровых зубов	🦷	🦷		🦷	
Для использования в лаборатории, когда необходим твердый силикон	🦷	🦷	🦷	🦷	🦷
Для регистрации с помощью оптики и лазера (регистрация антагонистов, окклюзии, препарирования) в технологии CAD/CAM					🦷

🦷 Очень рекомендуем 🦷 рекомендуем

